



Descrição Técnica: Agulha aspirativa para transplante de medula óssea (Miélograma).

Nome Comercial: Perfectus

Código: PS

Marca: Medax

Fabricante: Medax Medical Devices

Procedência: Itália

Medidas:

Tamanho (mm)	Diâmetro (Ga)			
	Verde escuro	Azul	Branco	Rosa
	14	15	16	18
20	PS 14 02 0-10	PS 15 020-10	PS 16 020-10	PS 18 020-10
30	PS 14 030-10	PS 15 030-10	PS 16 030-10	PS 18 030-10
35	PS 14 035-10	PS 15 035-10	PS 16 035-10	PS 18 035-10
40	PS 14 040-10	PS 15 040-10	PS 16 040-10	PS 18 040-10
45	PS 14 045-10	PS 15 045-10	PS 16 045-10	PS 18 045-10
50	PS 14 050-10	PS 15 050-10	PS 16 050-10	PS 18 050-10
55	PS 14 055-10	PS 15 055-10	PS 16 055-10	PS 18 055-10
60	PS 14 060-10	PS 15 060-10	PS 16 060-10	PS 18 060-10
65	PS 14 065-10	PS 15 065-10	PS 16 065-10	PS 18 065-10
70	PS 14 070-10	PS 15 070-10	PS 16 070-10	PS 18 070-10
75	PS 14 075-10	PS 15 075-10	PS 16 075-10	PS 18 075-10
80	PS 14 080-10	PS 15 080-10	PS 16 080-10	PS 18 080-10
85	PS 14 085-10	PS 15 085-10	PS 16 085-10	PS 18 085-10
90	PS 14 090-10	PS 15 090-10	PS 16 090-10	PS 18 090-10
95	PS 14 095-10	PS 15 095-10	PS 16 095-10	PS 18 095-10
100	PS 14 100-10	PS 15 100-10	PS 16 100-10	PS 18 100-10

Registro no Ministério da Saúde: 80157810006 / 80157810019

Apresentação: Caixa com dez unidades

Prazo de Validade: 5 anos

Embalagem: Unitária - Blister

Produto Estéril. Esterilizado por Óxido de Etileno
Produto de Uso Único. Proibido Reutilizar ou Reprocessar

INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Utilizadas para coleta de material para transplante de medula óssea, e administração de medicamentos.



SurgicalMedi Importadora e Distribuidora de Materiais Cirúrgicos Ltda ME

Rua Flórida, 344 - Barreirinha - Curitiba/PR CEP 82.560-130

Phone: +55 41 3030 2769

Mobile: +55 41 9 9679 8613

<http://surgicalmedi.com/>

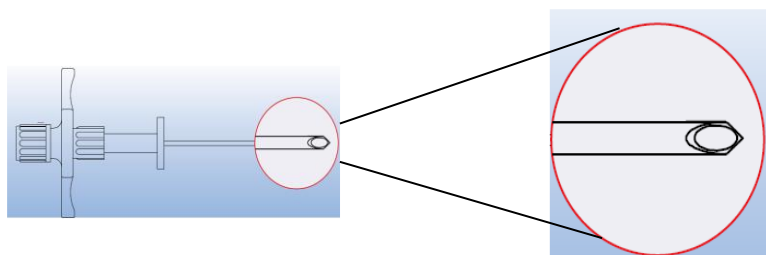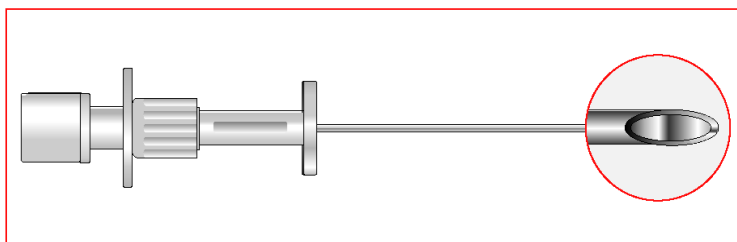

CARACTERÍSTICAS:

- Limitador de profundidade com rosca ajustável e removível.
- Conector Luer Lock permite o encaixe da seringa.

Cânula Externa siliconizada facilita a penetração.

SurgicalMedi Importadora e Distribuidora de Materiais Cirúrgicos Ltda ME

Rua Flórida, 344 - Barreirinha - Curitiba/PR CEP 82.560-130

Phone: +55 41 3030 2769

Mobile: +55 41 9 9679 8613

<http://surgicalmedi.com/>



A coleta de material para a realização de um mielograma é feita através de uma punção da medula óssea, essa coleta só é feita por 2 locais, osso esterno e crista ilíaca, o esterno é o osso que fica entre os seios, e a crista ilíaca é o osso do quadril. O paciente deve permanecer deitado de lado ou de costas. Após desinfecção da pele e anestesia local, a coleta é realizada através da introdução da agulha dentro do osso (esterno ou a crista ilíaca). Uma pequena quantidade de medula é aspirada com uma seringa. O material é em seguida repartido sobre lâminas de microscópio e analisado.

Doação de medula óssea: neste procedimento paciente (receptor) recebe a medula óssea por meio de uma transfusão, ou seja, as células mãe ou progenitoras do sangue são colhidas do doador (conforme procedimento acima), colocadas em uma bolsa de "sangue" e transfundidas para o paciente. As células transfundidas circulam pelo sangue, se instalam no interior dos ossos, dentro da medula óssea do paciente. Depois de um período variável de tempo ocorre a "pega" da medula, quando as células do doador começam a se multiplicar, produzindo as células do sangue e enviando ao sangue glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas normalmente.

Para procedimento em neonatal a agulha deve ser introduzida na tíbia.

As medidas mais utilizadas são:

Pediatria: gauge 18

Adulto: gauge 15 e 16

O profissional que faz o mielograma e o transplante de medula óssea é o médico Hematologista.

SurgicalMedi Importadora e Distribuidora de Materiais Cirúrgicos Ltda ME

Rua Flórida, 344 – Barreirinha – Curitiba/PR CEP 82.560-130

Phone: +55 41 3030 2769

Mobile: +55 41 9 9679 8613

<http://surgicalmedi.com/>