

Descrição Técnica: Agulha para marcação de nódulo mamário em mamografia, ultrassonografia e estereotaxia, marcação em centímetros e fio guia.

Nome Comercial: Sinurep

Código: SR

Marca: Medax

Fabricante: Medax Medical Devices

Procedência: Itália

Medidas: 20gx06cm / 20gx08cm e 20gx10cm / 20gx12cm / 20gx16cm

Registro no Ministério da Saúde: 80157810025

Apresentação: Caixa com vinte unidades

Prazo de Validade: 5 anos após data de fabricação

Embalagem: Unitária - Blister.

Produto Estéril. Esterilizado por Óxido de Etileno

Produto de Uso Único. Proibido Reutilizar ou Reprocessar

INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:


Agulha de marcação de nódulo mamário é um sistema de marcação de lesão preciso e fácil de usar em mamografia, ultrassonografia e estereotaxia.

É um sistema de marcação de que permite localização precisa de lesões não palpáveis.

Com uma cânula siliconizada, permite a colocação de profundidade mais precisa com entrada e retirada suave.

O sistema de marcação de lesão com fio permite ser carregada da parte traseira da cânula, após agulha ter sido localizada na lesão. Um refinamento de sistemas anteriores de orientação pelo fio, a pós-carga evita a marcação prematura e é facilitada por um início de cânula em forma de funil.

A agulha possui graduações de 1,0 cm claramente visíveis na orientação, permitindo colocação exata da agulha.

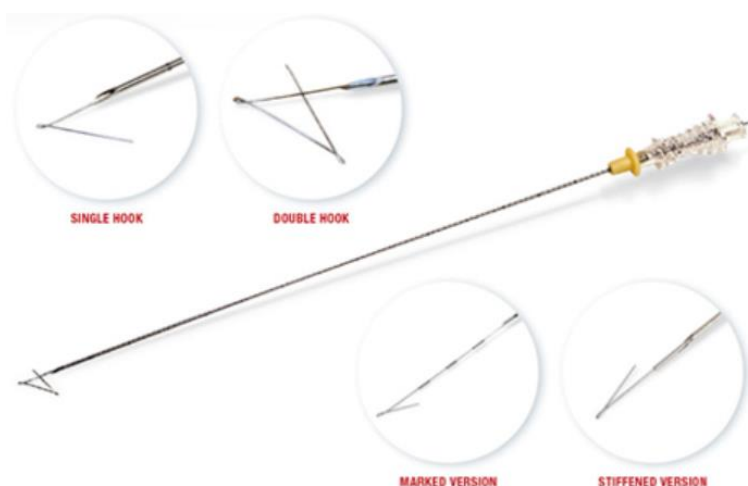

SurgicalMedi Importadora e Distribuidora de Materiais Cirúrgicos Ltda ME

Rua Flórida, 344 - Barreirinha - Curitiba/PR CEP 82.560-130

Phone: +55 41 3030 2769

Mobile: +55 41 9 9679 8613

<http://surgicalmedi.com/>