

CATETER URETERAL HIDROFÍLICO

Para drenagem da urina da pelve renal para o exterior através da uretra e Pielografia.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- + Amecath oferece uma gama completa de cateteres ureterais.
- + Os cateteres ureterais hidrofílicos podem ser utilizados para diversas funções, como manutenção da drenagem, infusão de contraste e dilatação ureteral.
- + Os cateteres ureterais de poliuretano são radiopacos de alta qualidade que oferece fácil manuseio, flexibilidade e resistência adequada a dobras.
- + O revestimento hidrofílico quando ativado atrai e retém água e outros líquidos na superfície do cateter, criando uma superfície de baixo atrito.
- + O material utilizado no revestimento hidrofílico é projetado somente para cateteres urinários.
- + O cateter ureteral hidrofílico é fornecido com um conector para amostragem ou injeção de contraste e com filete de monofilamento.
- + O cateter pode ter diâmetros diferentes, variando de 3 Fr. a 8 Fr. e comprimento padrão de 70 ± 2 cm. É graduado a cada 5 cm ao longo de 70 cm.


AMECATH

CONTÉM

01 CATETER

01 CONECTOR DO CATETER

01 MONOFILAMENTO

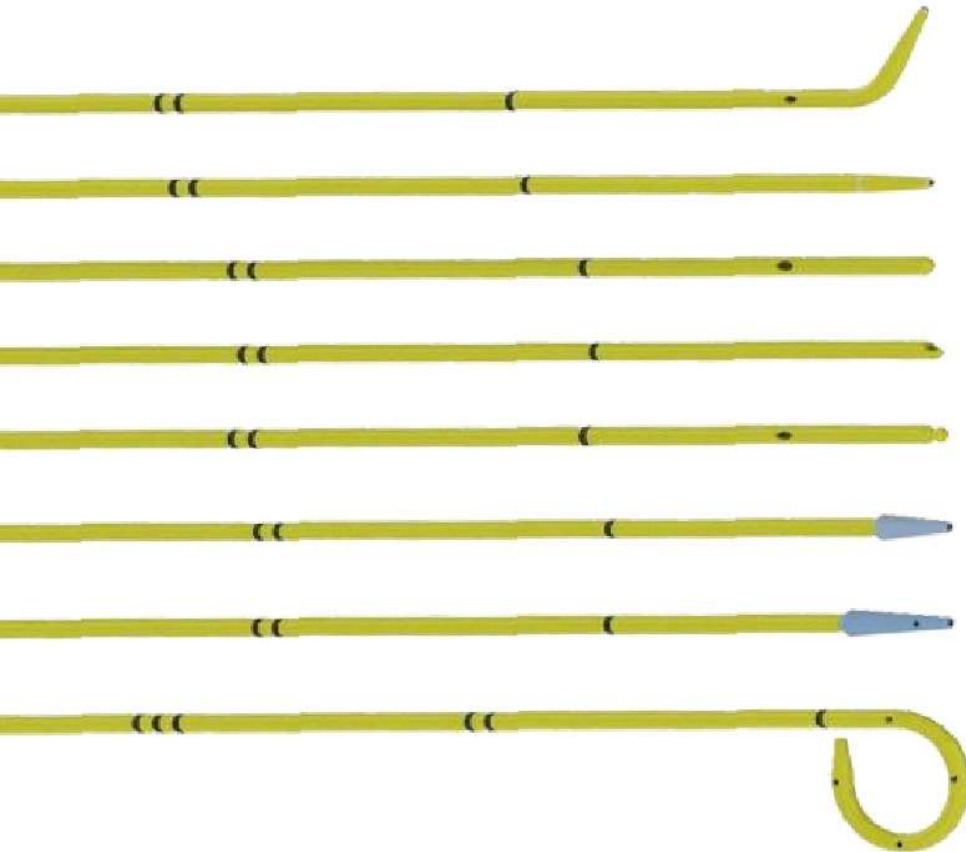

PONTAS VARIADAS

PONTA DE ANJO

PONTA ABERTA CÔNICA

PONTA REDONDA FECHADA

PONTA DE APITO

PONTA DE OLIVA

PONTA DE CONE

PONTA DECHEVASSU

PONTA CURVA

CHAVE DE CÓDIGO
UC-XX-TS-C

UC: Cateter Ureteral.

XX: Diâmetro em FR.

T: Configuração da ponta: (TO) para ponta aberta cônica, (CL) para ponta redonda fechada, (WH) para ponta de apito, (CO) para ponta de cone, (OL) para ponta de azeitona, (CH) para ponta de Chevassu, (CU) para ponta curva, (AO) para ponta de anjo.

S: Rigidez: Amarelo (Y) para macio, Branco (W) para semi macio e Azul (B) para firme.

C: Tipo de revestimento: (0) para nenhum revestimento, (H) para revestimento hirofílico.

ANVISA 81665690014

 **SurgicalMedi**

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA ME

Rua Flórida, 344 – Barreirinha – Curitiba/PR – CEP 82.560-130

Fone: +55 41 3030 2769

surgicalmedi.com