

## **KIT CATETER NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA**

Utilizado para drenar qualquer coleção cística no interior do corpo, guiada cirurgicamente, graficamente ou por ultrassom nos casos de dilatação do sistema linfático da pelve.

## **CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS**



- + O cateter de poliuretano proporciona conforto ao paciente.
- + Com várias configurações de diâmetros de 4fr até 24fr e comprimentos de 30cm.
- + O revestimento hidrofílico quando ativado atrai e retém água e outros líquidos na superfície do cateter, criando uma superfície de baixo atrito.
- + O material utilizado no revestimento hidrofílico é projetado somente para cateteres urinários.
- + Os orifícios laterais são projetados para a drenagem máxima.
- + O fio guia com 100 cm de comprimento e ponta J, tem o núcleo em Nitinol e revestimento PTFE. Oferece benefícios como grande flexibilidade e anti-quebra, para melhor manuseio durante o procedimento.
- + A cânula possui um estilete com ponta tri facetada que proporciona uma inserção precisa e não danifica o fio guia.
- + Oferecemos com ponta Pigtail ou ponta Malecot.



CATETER HIDRÓFÍLICO COM PONTA PIGTAIL



CATETER HIDRÓFÍLICO COM PONTA MALECOT

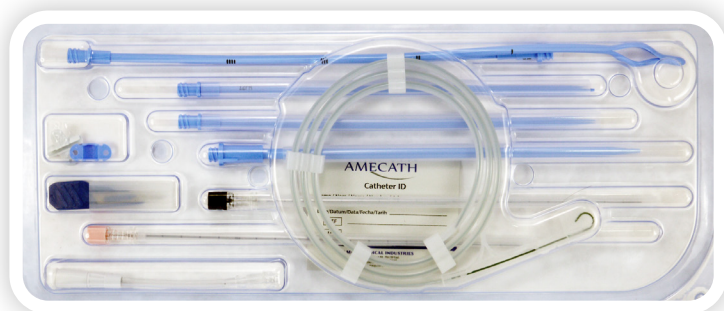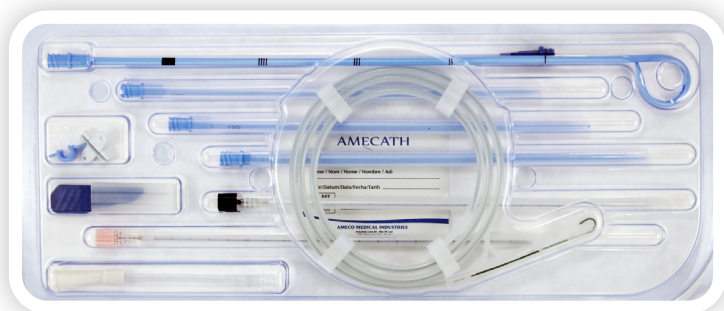

## CONTÉM

- 01 CATETER DE NEFROSTOMIA HIDRÓFÍLICO
- 01 AGULHA DE PUNÇÃO 18G X 20CM (CÂNULA)
- 01 AGULHA CHIBA 22G X 20CM
- 01 FIO GUIA J EM NITINOL 0.035" X 100CM
- 03 OU 04 DILATADORES
- 01 RETIFICADOR - ENDIREITADOR DO CATETER
- 01 BISTURI
- 01 TUBO DE CONEXÃO
- 02 ASAS DE FIXAÇÃO

## CHAVE DE CÓDIGO NEP-XX-YY-T-K-H

- NEP: Cateter Nefrostomia. NEP-XX-YY-T-K-H
- XX: Diâmetro em FR
- YY: Comprimento em cm.
- T: Tipo de ponta: J para ponta Pigtail ou M para ponta Malecot
- K: Kit completo
- H: Cateter com revestimento Hidrofílico

## ANVISA

- 81665690001 Kit Nefrostomia Hidrofílico com ponta Pigtail
- 81665690002 Kit Nefrostomia Hidrofílico com ponta Malecot



IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA ME  
Rua Flórida, 344 – Barreirinha – Curitiba/PR – CEP 82.560-130  
Fone: +55 41 3030 2769

[surgicalmedi.com](http://surgicalmedi.com)

